

Wytrząsarka orbitalna Orbital Maxi



Cechy wytrząsarki:

- Wytrząsarka orbitalna odpowiednia do pojemników o dużych rozmiarach
- Regulacja prędkości sterowana mikroprocesorowo
- Stała prędkość niezależnie od obciążenia
- Płynny start i zatrzymanie pracy niezależnie od wybranej prędkości
- Podświetlany wyświetlacz LCD wskazujący wybraną oraz rzeczywistą prędkość i zegar (z alarmem dźwiękowy)
- Sterowanie za pomocą przycisków membranowych
- Automatyczny restart po nieoczekiwanym wyłączeniu z zachowaniem tych samych parametrów co przed incydentem. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat.
- Antypoślizgowa powierzchnia – dostępna opcjonalnie
- Cicha praca. Urządzenie przystosowane do pracy ciągłej.
- **Jako opcja dostępna możliwość dostosowania wytrząsarki do pracy w temperaturze od 4°C**

Specyfikacja techniczna		
Model	OL30-ME	OL30-HE
Maksymalne obciążenie	25 kg	
Moc	50 W	
Rodzaj ruchu	Orbitalny	
Amplituda	30 mm	
Zakres prędkości	30-220 obr/min	
Rozdzielczość	5 obr/min	
Timer	0-120 min	
Dane ogólne		
Rodzaj silnika	Standardowy	Bezsztotkowy
Powierzchnia użytkowa	350 x 400 mm	
Wymiary	410 x 570 x 140 mm	
Waga	12 kg	
Klasa ochrony	IP54	

Akcesoria:


Uniwersalna platforma 350 x 400 mm



Uniwersalna podwójna platforma 350 x 400 mm




Platforma antypoślizgowa 350 x 400 mm

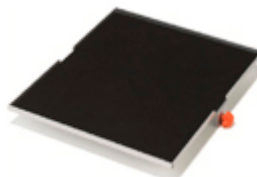

Podwójna platforma antypoślizgowa 350 x 400 mm



Platforma do mocowania uchwytów na kolby Erlenmeyera

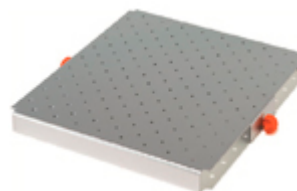

- uchwyt na kolby Erlenmeyera 50 ml (do 30 szt.)
- uchwyt na kolby Erlenmeyera 100 ml (do 20 szt.)
- uchwyt na kolby Erlenmeyera 250 ml (do 10 szt.)
- uchwyt na kolby Erlenmeyera 500 ml (do 8 szt.)
- uchwyt na kolby Erlenmeyera 1000 ml (do 5 szt.)
- uchwyt na kolby Erlenmeyera 2000 ml (do 4 szt.)



Platforma przeznaczona dla rozdzielaczy
gruszkowych



Wyprodukowano w UE